


Funk-Alarmtrittmatte & Bettkantensensor

Frequenzwechsel

Sollte der Funkgong ertönen, ohne dass Sie die Funk Alarmtrittmatte betätigt haben, kann dies an einem Gerät in Ihrer Umgebung liegen, das auf derselben Frequenz betrieben wird. Sender und Empfänger können dann auf eine andere Frequenz eingestellt werden

Öffnen Sie die 4 Schrauben des Sendergehäuse der Funkalarmtrittmatte

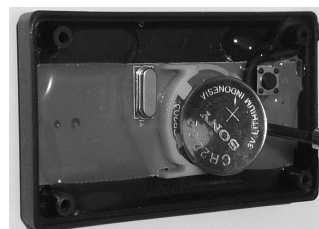

Entfernen Sie für 10 Sekunden die Batterie aus dem Sender der Funk-aAlarmtrittmatte, so dass die gespeicherte Frequenz gelöscht wird. Legen Sie die Batterie erneut ein

Entfernen Sie die Batterien kurz aus den Funkempfängern legen Sie die beiden Batterien in die Funk-Empfänger ein....ein Bestätigungs Piep Ton ertönt... Betätigen Sie die Funk-Alarmtrittmatte...fertig!

